

CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTOS

medika[®]

QUALIDADE EM SAÚDE



HEMODIÁLISE



CATETER DE CURTA PERMANÊNCIA HIGH FLOW TRIPLO LÚMEN

Novo design para otimização do fluxo sanguíneo: parede do cateter mais fina e diâmetro interno maior, o que permite a otimização do fluxo.

Extremidade distal em elipse, sem orifícios laterais: reduz a formação de coágulos e a aderência à parede do vaso, além de minimizar o trauma na inserção.

Guia metálico em nitinol: garante alta flexibilidade e resistência a dobras.

Disponível nas extensões reta e curvas para o mesmo lado.

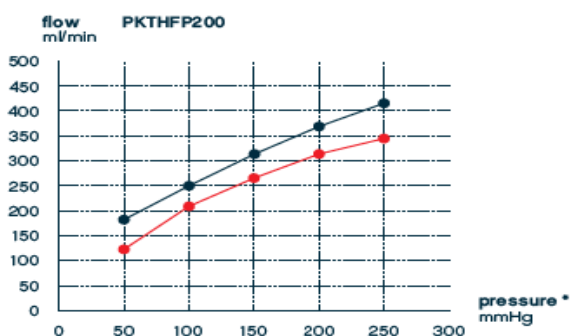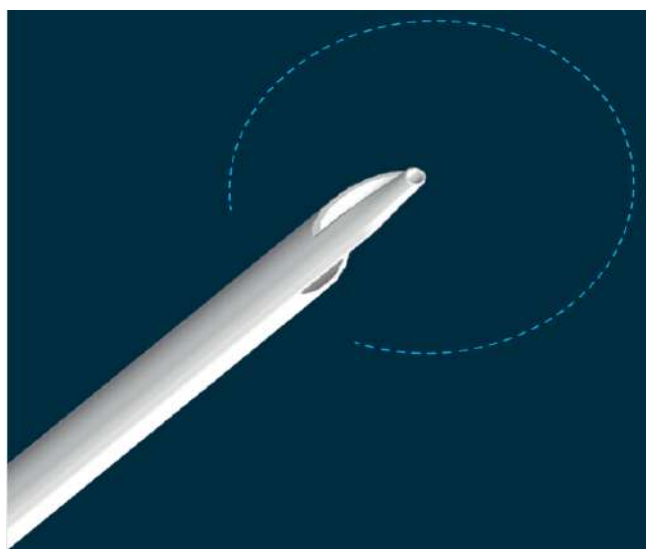

TAMANHOS

CATETER DE TRIPLO LÚMEN HIGH FLOW PARA HEMODIÁLISE COM EXTENSÕES RETAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	GUIA METÁLICO	DILATADOR	AGULHA
PKTHF13P150	13,5 Fr	15 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKTHF13P175	13,5 Fr	17,5 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKTHF13P200	13,5 Fr	20 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKTHF13P250	13,5 Fr	25 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm

CATETER DE TRIPLO LÚMEN HIGH FLOW PARA HEMODIÁLISE COM EXTENSÕES SAME SIDE

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	GUIA METÁLICO	DILATADOR	AGULHA
PKTHF13P150R	13,5 Fr	15 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKTHF13P175R	13,5 Fr	17,5 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKTHF13P200R	13,5 Fr	20 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKTHF13P250R	13,5 Fr	25 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm

CATETER DE CURTA PERMANÊNCIA HIGH FLOW DUPLO LÚMEN

Fabricante: Joline. Alemanha
Nº ANVISA:10289680164 / 10289680160




Novo design para otimização do fluxo sanguíneo: parede do cateter mais fina e diâmetro interno maior, o que permite a otimização do fluxo.

Extremidade distal em elipse, sem orifícios laterais: reduz a formação de coágulos e a aderência à parede do vaso, além de minimizar o trauma na inserção.

Mandril pré inserido no cateter: proporciona uma inserção fácil e atraumática.

Guia metálico em nitinol: garante alta flexibilidade e resistência a dobras.

Disponível nas extensões reta e curvas para o mesmo lado.

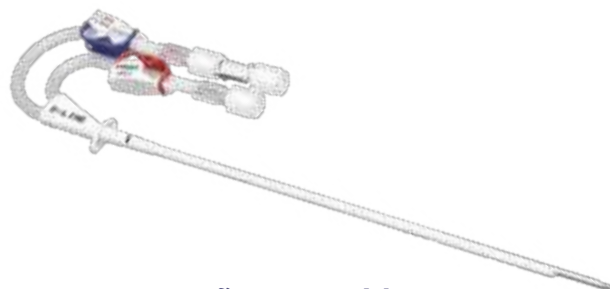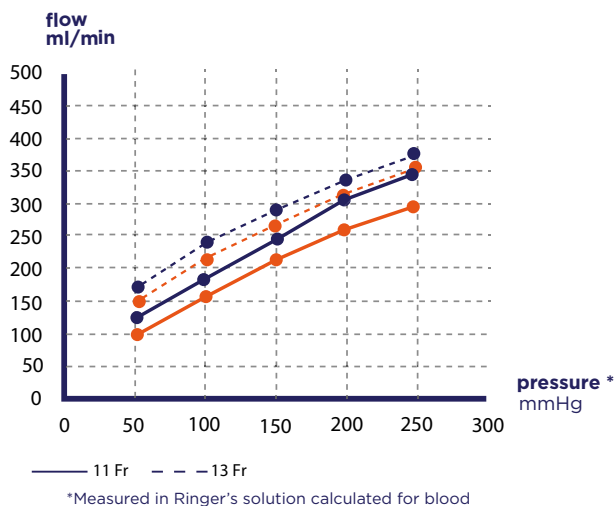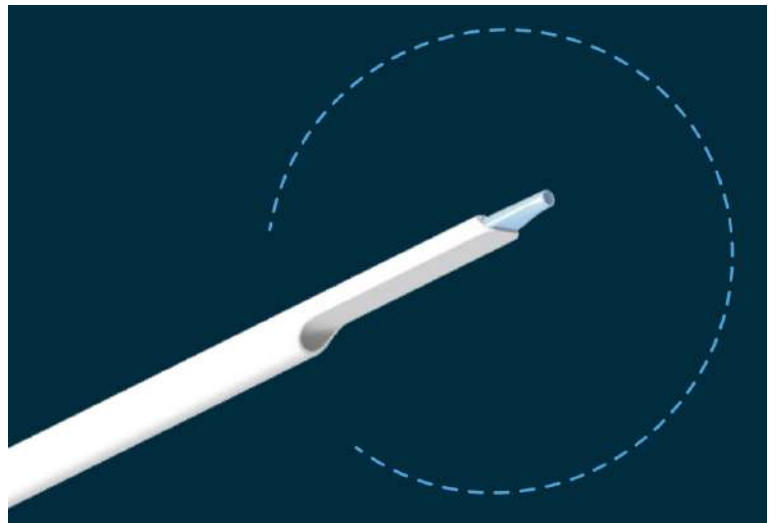

Extensão same side

TAMANHOS

CATETER DE DUPLO LÚMEN HIGH FLOW PARA HEMODIÁLISE COM EXTENSÕES RETAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	GUIA METÁLICO	DILATADOR	AGULHA
PKHF11P150	11 Fr	15 cm	0.035"x70cm em jota	12Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF11P175	11 Fr	17,5 cm	0.035"x70cm em jota	12Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF11P200	11 Fr	20 cm	0.035"x70cm em jota	12Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF11P250	11 Fr	25 cm	0.035"x70cm em jota	12Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF13PH150	13 Fr	15 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF13PH175	13 Fr	17,5 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF13PH200	13 Fr	20 cm	0.035"x70cm em jota	14Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF13PH250	13 Fr	25 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm

CATETER DE DUPLO LÚMEN HIGH FLOW PARA HEMODIÁLISE COM EXTENSÕES SAME SIDE

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	GUIA METÁLICO	DILATADOR	AGULHA
PKHF11P150R	11 Fr	15 cm	0.035"x70cm em jota	12Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF11P175R	11 Fr	17,5 cm	0.035"x70cm em jota	12Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF11P200R	11 Fr	20 cm	0.035"x70cm em jota	12Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF11P250R	11 Fr	25 cm	0.035"x70cm em jota	12Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF13PH150R	13 Fr	15 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF13PH175R	13 Fr	17,5 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF13PH200R	13 Fr	20 cm	0.035"x70cm em jota	14Fr x 150mm	18G x 7cm
PKHF13PH250R	13 Fr	25 cm	0.035"x70cm em jota	13Fr x 150mm	18G x 7cm


CATETER DE DUPLO LÚMEN CONVENCIONAL PARA HEMODIÁLISE D-LINE

Fabricante: Joline. Alemanha
Nº ANVISA: 10289680199/ 10289680200

Cateter duplo lumen em poliuretano termossensível, radiopaco, 11 Fr de diâmetro externo, lúmen contínuo com 03 orifícios laterais na extremidade distal na via arterial, anel de sutura rotatório, pinças com informações sobre volume de cada lúmen, conectores luer lock em cada via do cateter.

Acompanha um dilatador de veia, **um guia metálico em nitinol**, uma agulha introdutora e 2 tampinhas de injeção.

Indicado para acesso vascular de curta permanência para a hemodiálise, hemoperfusão e aférese.

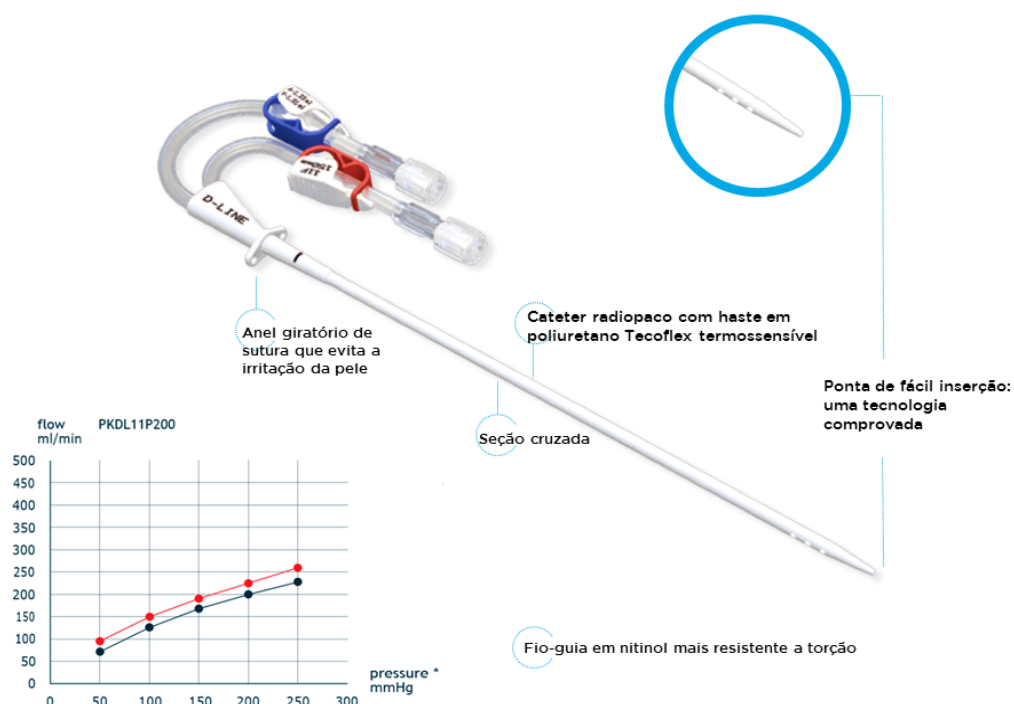

Disponível nas extensões retas e curvas para o mesmo lado.



TAMANHOS

CATETER DE DUPLO LÚMEN PARA HEMODIÁLISE COM EXTENSÕES RETAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
PKDL11P100	11 Fr	10 cm
PKDL11P125	11 Fr	12,5 cm
PKDL11P150	11 Fr	15 cm
PKDL11P175	11 Fr	17,5 cm
PKDL11P200	11 Fr	20 cm
PKDL11P225	11 Fr	22,5 cm
PKDL11P250	11 Fr	25 cm

CATETER DE DUPLO LÚMEN PARA HEMODIÁLISE COM EXTENSÕES SAME SIDE

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
PKDL11P150R	11 Fr	15 cm
PKDL11P175R	11 Fr	17,5 cm
PKDL11P200R	11 Fr	20 cm

CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA SMOOTH FLOW

Fabricante: Joline. Alemanha
Nº ANVISA: 10289680142


Fabricado em carbothane, termossensível, radiopaco.

Com lúmen contínuo e sem orifícios laterais, o que otimiza o fluxo sanguíneo e reduz a formação de coágulos.

Possui extremidade distal em formato hemodinâmico.



ow
il/min

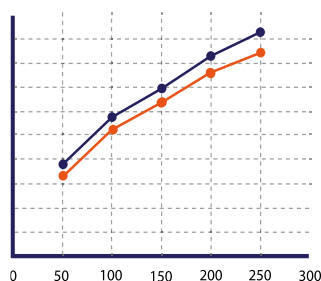

Alto fluxo em pressão baixa





MODELOS DOS CONJUNTOS

PKSF15C 19/36 | Contém:

- 01 Cateter radiopaco em carbothane 15,5 Fr x 19 cm do couff à extremidade distal, 36 cm de comprimento total
- 01 Agulha de punção 18G x 7 cm
- 01 Guia metálico em nitinol 0,035" x 70 cm em jota
- 01 Dilatador de veia 12 Fr x 150 mm
- 01 Introduutor peel away com válvula 16 Fr
- 01 Trocarte tunelizador
- 02 Tampinhas de injeção

PKSF15C 23/40 | Contém:

- 01 Cateter radiopaco em carbothane 15,5 Fr x 23 cm do couff à extremidade distal, 40 cm de comprimento total
- 01 Agulha de punção 18G x 7 cm
- 01 Guia metálico em nitinol 0,035" x 70 cm em jota
- 01 Dilatador de veia 12 Fr x 150 mm
- 01 Introduutor peel away com válvula 16 Fr
- 01 Trocarte tunelizador
- 02 Tampinhas de injeção

PKSF15C 28/45 | Contém:

- 01 Cateter radiopaco em carbothane 15,5 Fr x 28 cm do couff à extremidade distal, 45 cm de comprimento total
- 01 Agulha de punção 18G x 7 cm
- 01 Guia metálico em nitinol 0,035" x 70 cm em jota
- 01 Dilatador de veia 12 Fr x 150 mm
- 01 Introduutor peel away com válvula 16 Fr
- 01 Trocarte tunelizador
- 02 Tampinhas de injeção

PKSF15C 33/50 | Contém:

- 01 Cateter radiopaco em carbothane 15,5 Fr x 33 cm do couff à extremidade distal, 50 cm de comprimento total
- 01 Agulha de punção 18G x 7 cm
- 01 Guia metálico em nitinol 0,035" x 70 cm em jota
- 01 Dilatador de veia 12 Fr x 150 mm
- 01 Introduutor peel away com válvula 16 Fr
- 01 Trocarte tunelizador
- 02 Tampinhas de injeção



medika.com.br

31 3688-1901
Rua Aleomar Baleeiro 15
Centro | Lagoa Santa | MG