

# microvelour®

Prótese Arterial Knitted




## CARACTERÍSTICAS

- Duplo microveludo
- Extremamente fortes
- Permeabilidade ZERO\*
- Fácil manuseio e sutura
- Excelente endotelização
- Macia, elástica e flexível

Registro ANVISA 80163740003

 **BARONE**

# Permeabilidade ZERO

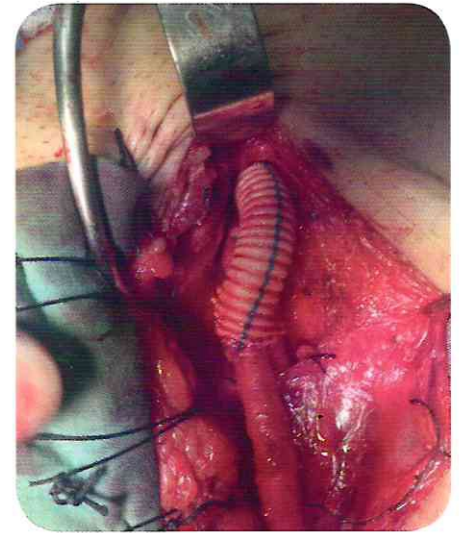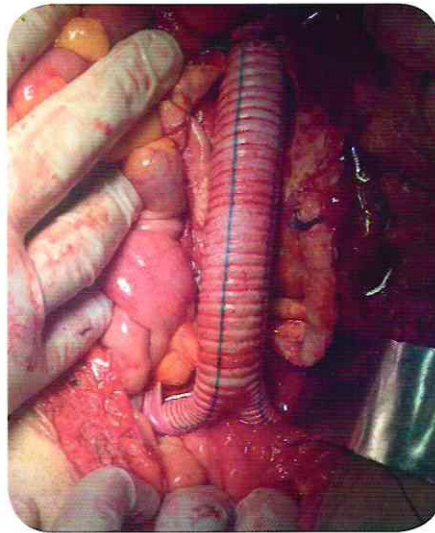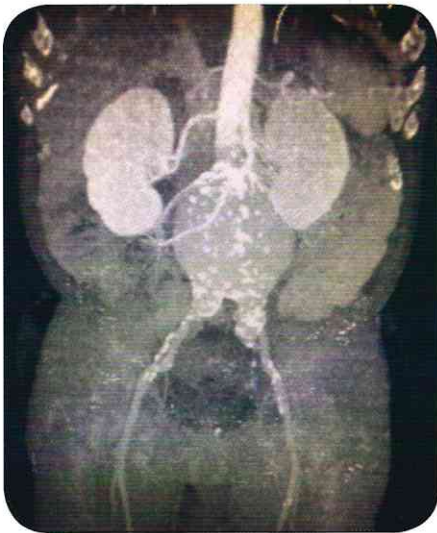

AAA infrarrenal com 11 cm de diâmetro, tratado com prótese Microvelour® 18 x 9 mm.

©Dr. José Rivera. Clínica Paraíso. Maracaibo, Venezuela. 2018.

**MICROVELOUR®** é uma família de próteses arteriais “knitted” fabricadas no **Brasil**. A malha de filamentos de poliéster texturizados é microaveludada interna e externamente, garantindo uma ótima endotelização e incorporação.

São impregnadas com solução à base de **colágeno bovino tipo I**, com permeabilidade ZERO\* durante a operação, e reabsorção entre 6 e 12 semanas.

O corrugado em espiral confere elasticidade e flexibilidade à prótese. A exclusiva linha-guia de cor **azul** auxilia a visualização, e evita a ocorrência de torções.

Para um melhor manuseio e sutura, sugere-se hidratar a prótese com solução fisiológica estéril previamente ao implante.

\* Menor que 5 ml/cm<sup>2</sup>/min a 120 mmHg, medido conforme ISO 7198

## MEDIDAS

30 cm	Código	Diâmetro
	31630	16 mm
	31830	18 mm
	32030	20 mm
	32230	22 mm
	32430	24 mm

60 cm	Código	Diâmetro
	30460	4 mm
	30660	6 mm
	30760	7 mm
	30860	8 mm
	31060	10 mm
	31260	12 mm
	31460	14 mm

40 cm	Código	Diâmetro
	31206	12 x 6 mm
	31407	14 x 7 mm
	31608	16 x 8 mm
	31809	18 x 9 mm
	32010	20 x 10 mm
	32211	22 x 11 mm
	32412	24 x 12 mm

Visite nosso site: [www.barone.med.br](http://www.barone.med.br)



Industrias H. A. Barone LTDA  
Rua Salto Grande, 646 - Jardim do Trevo - Campinas/SP - Brasil - CEP 13040-001  
Fone: + 55 (19) 3238-8615 Fax: + 55 (19) 3238-6237 contato@barone.med.br



Fabricado no Brasil